



ONDERHOUD

Belangrijk is dat u ongeveer **driemaandelijks** bij Hoorcentrum Aerts langskomt voor een grondige **reiniging**. Dat is belangrijk om een goede geluidskwaliteit te garanderen. Dat kan zonder afspraak. **Jaarlijks** zou u ook op afspraak moeten komen om **uw gehoor en hoortoestel te controleren**. Op die manier kunnen we vroegtijdig ingrijpen bij problemen en een algemene controle doen. Daartoe moet u een afspraak maken in een van onze hoorcentra.

Voor een optimale werking is het belangrijk om dagelijks uw hoorapparaat te reinigen. Dat vraagt niet meer dan een minuutje tijd. Het reinigen is niet supermoelijk, met dagelijkse oefening zijn we ervan overtuigd dat u dat snel zelf kan. We zetten de belangrijkste reinigingstips even op een rijtje.

Uw hoortoestel komt dagdagelijks in contact met stof, vocht en bacteriën. Om de hygiëne van uw hoortoestel te verzekeren, raden wij aan om het dagelijks te reinigen.

Die reiniging bestaat uit 3 elementen: schoonmaken, vervangen van de filter en drogen.



1. Schoonmaken

Bij Hoorcentrum Aerts vindt u reinigingsdoekjes die gemaakt zijn om hoortoestellen proper te maken en te desinfecteren, en dat zonder de kleur van uw hoortoestel aan te tasten. U neemt uit deze doos één doekje en gaat ermee over uw hoortoestel zelf en daarna over het stukje in het oor. Zorg ervoor dat al het zichtbaar vuil wordt verwijderd.



Indien u de spray thuis heeft, moet u die eerst op een doekje sprayen en ermee over uw hoortoestel en oorstukje gaan.

2. Vervangen van de filter


De luidsprekerfilter zorgt ervoor dat uw hoortoestel extra wordt beschermd. Die filters dienen wel regelmatig te worden vervangen. Want als ze verstopt zitten, zal uw hoortoestel verzwakt klinken. De frequentie waarmee u die filter moet vervangen, is individueel bepaald. Gemiddeld is dat tussen de twee dagen en de twee weken. Vraag uw audioloog naar de geschikte frequentie voor u. U kan een filter niet hergebruiken.



Indien nodig, moet u eerst de dome van de luidspreker verwijderen.



Haal een staafje/rondje met filter uit het doosje.

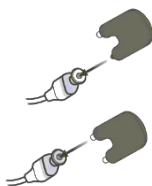

Gebruik de kant zonder filter om de oude filter uit de luidspreker te halen.

Draai het staafje vervolgens om en duw de nieuwe filter erop. Trek het staafje er weer uit en de filter zou nu moeten blijven zitten.

3. Drogen

Wanneer u uw hoortoestel doorheen de dag draagt, zal het hoortoestel niet alleen worden blootgesteld aan stof, maar ook aan vocht (regen, zweet ...). Aangezien een hoortoestel voor een groot deel uit elektronica bestaat, is het van cruciaal belang dat het niet vochtig kan worden. Zelfs wanneer een toestel niet meteen uitvalt na contact met vocht, kan dat nog steeds later gebeuren door corrosie. We raden u daarom aan om uw hoortoestel dagdagelijks te drogen. Drogen doet u best 's avonds en



dat elke avond. Drogen kan via een van de onderstaande systemen: droogtablet of droogbox.

3.1. Droogbox



Ook hier raden we, omwille van de warmte, aan om de batterij uit uw hoortoestel te nemen.



Leg de hoortoestellen in uw droogbox. Duw op de startknop zodat de lampjes erboven branden. De eerste minuten zal er een UV-lampje de bacteriën op uw toestel verwijderen. Daarna zal door de circulatie van warme lucht het vocht verdampen. Uw droogbox zal automatisch uitvallen na 2,5 uur. Als u 2x op de startknop duwt, werkt het toestel 5 uur.



3.2. Droogtablet



1 Neem uw droogtablet uit de verpakking. Zorg ervoor dat het kartonnetje wel steeds gesloten blijft.



2 Neem de batterij uit uw hoortoestel.



3 Leg het tablet, met het kartonnetje naar boven, samen met uw hoortoestel in een doosje. Laat het een hele nacht liggen en haal alles er 's morgens weer uit. Vergeet niet uw doosje weer goed te sluiten. Uw droogtablet is oranje bij gebruik, het zal witter worden na een maand en dan moet u het vervangen.

SOORTEN


REINIGINGSPRODUCTEN

	<p><i>90 vochtige doekjes in verdelers</i></p> <p>Doekjes om uw hoortoestel schoon te maken</p> <p>€ 13,10</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p><i>Reinigingsvloeistof 30 ml</i></p> <p>Op een doekje sprayen om uw hoortoestel schoon te maken</p> <p>€ 6,50</p>
	<p><i>Droogtabletten, 8 stuks</i></p> <p>Om uw hoortoestel dagdagelijks te drogen.</p> <p>€ 8,40</p>
	<p><i>Droogdoosje</i></p> <p>Sluit goed af, zodat het geschikt is voor het drogen met droogtabletten</p> <p>€ 3,45</p>



	<p><i>Droogbox</i></p> <p>Elektrisch droogstelsysteem inclusief UV-filter</p> <p>€ 79,50</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------