

ONDERHOUD VAN UW HOORAPPARAAT

Hoortoestel in het oor



HOORCENTRUM AERTS

info@hoorcentrumaerts.be
www.hoorcentrumaerts.be



HOORCENTRUM AERTS
DE HOORSPECIALIST

Onderhoud

Belangrijk is dat u ongeveer **driemaandelijks** bij Hoorcentrum Aerts langskomt voor een grondige **reiniging**. Zo kunnen we u een goede geluidskwaliteit en optimaal gebruik van uw toestel garanderen. Dit kan zonder afspraak. We nodigen u **jaarlijks** uit om **uw gehoor en hoorapparaat te controleren**. Op die manier kunnen we vroegtijdig ingrijpen bij kwaliteitsverlies en een algemene controle doen. Daartoe dient u een afspraak te maken in één van onze hoorcentra.

Uw hoortoestel komt dagdagelijks in contact met stof, vocht en bacteriën. Om hygiëne van uw hoortoestel te verzekeren raden wij aan om dit dagelijks te reinigen.

Voor een optimale werking is het belangrijk om dagelijks je hoorapparaat te reinigen. Dat vraagt niet meer dan een minuutje tijd. Het is reinigen is niet super moeilijk. Met dagelijkse oefening zijn we ervan overtuigd dat u dit snel zelf kan. We zetten de belangrijkste reinigingstips op een rijtje.



DEZE REINIGING BESTAAT UIT 3 ELEMENTEN:

- Schoonmaken
- Vervangen van de filters
- Drogen





1. Schoonmaken

Bij Hoorcentrum Aerts vindt u reinigingsdoekjes die gemaakt zijn om hoortoestellen proper te maken en te desinfecteren. Dit zonder de kleur van uw hoortoestel aan te tasten. U neemt uit deze doos één doekje en gaat hiermee over uw hoortoestel. Zorg ervoor dat al het zichtbaar vuil verwijderd wordt.

Indien u de spray thuis gebruikt, dient u deze eerst op een doekje aan te brengen, nooit rechtstreeks op uw hoortoestel.



2. Vervangen van de filter

De luidsprekerfilter zorgt ervoor dat uw hoortoestel extra beschermd wordt. Deze filters dienen wel regelmatig vervangen te worden. Want indien deze niet volledig vrij zijn, zal uw hoortoestel verzwakt klinken. De frequentie waarmee u deze filter moet vervangen is persoonsgebonden. Dit varieert tussen 2 dagen en 2 weken. Vraag uw audioloog naar de geschikte frequentie voor u. U kan een filter niet hergebruiken.



Haal een staafje/rondje met filter uit het doosje.



Gebruik de kant zonder filter om de oude filter uit de luidspreker te halen. Vaak is een draaibeweging nodig.




Draai het staafje vervolgens om en duw de nieuwe filter erop. Trek het staafje er weer uit en de filter zou nu moeten blijven zitten.

3. Drogen

Wanneer u uw hoorapparaat doorheen de dag draagt, zal het hoorapparaat niet alleen blootgesteld worden aan stof, maar ook aan vocht (regen, zweet,...). Gezien een hoorapparaat voor een groot deel uit elektronica bestaat, is het van cruciaal belang dat dit niet vochtig kan worden. Zelfs wanneer een toestel niet meteen uitvalt na contact met vocht, kan dit nog steeds later gebeuren door corrosie. Drogen kan via één van onderstaande systemen: droogtablet of droogbox.

We raden u aan om uw hoorapparaat dagdagelijks te drogen. Drogen doet u best 's avonds en dit elke avond.

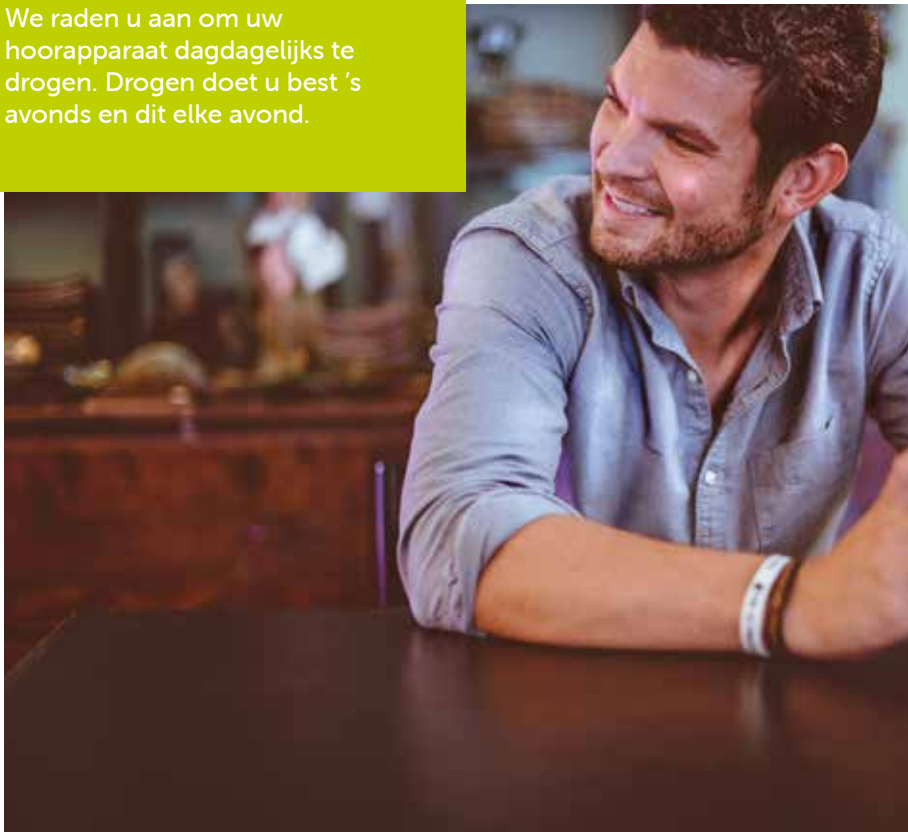



3.1 Droogbox



Ook hier raden we, omwille van de warmte, aan om de batterij uit uw hoorapparaat te nemen.



Leg de hoorapparaten in uw droogbox. Duw op de startknop zodat de lampjes erboven branden. De eerste minuten zal er een UV-lampje de bacteriën op uw toestel verwijderen. Daarna zal door de circulatie van warme lucht het vocht verdampen. Uw droogbox zal automatisch uitvallen na 2.5 uur. Indien u 2x op de startknop duwt, werkt het toestel 5 uur.

3.2 Droogtablet



Neem uw droogtablet uit de verpakking. Zorg ervoor dat het kartonnetje wel steeds gesloten blijft.



Neem de batterij uit uw hoorapparaat.



Leg de tablet, met het kartonnetje naar boven, samen met uw hoorapparaat en oorstuk in een doosje. Laat dit een hele nacht liggen en haal alles er 's morgens weer uit. Vergeet niet uw doosje weer goed te sluiten. Uw droogtablet is oranje bij gebruik, ze zal witter worden na 1 maand en dan dient u deze te vervangen.





Soorten reinigingsproducten



90 VOCHTIGE DOEKJES IN VERDELER

Doekjes om uw hoorapparaat schoon te maken



REINIGINGSVLOEISTOF 30 ML

Op een doekje aanbrengen om uw hoorapparaat schoon te maken.



DROOGTABLETTEN, 8 STUKS

Om uw hoorapparaat dagdagelijks te drogen.



DROOGDOOSJE

Sluit goed af, zodat het geschikt is voor het drogen met droogtabletten



DROOGBOX

Elektrisch droogstelsel inclusief UV-filter om te desinfecteren.



HOORCENTRUM AERTS

info@hoorcentrumaerts.be
www.hoorcentrumaerts.be